

Detalles del pedido

Identificación cliente

Técnico

Ref. paciente

Cover UNYQ previo

Comentarios

Producto

Diseño

Material

Firm

Flex

Prótesis

TF

TT

Acabado

Brillo

Mate

Ajuste

Imanes &
Fast-clamp

Imanes &
C-Clamp

Imanes &
C-Clamp

Colores

Global

Delantero

Trasero

Base

Detalle

Extras

Grabado (Firm/Flex)

Vinilo (Firm)

Protector de rodilla (Firm TF)

Reducción
de medidas

0 %

5 %

10 %

Medidas

Elige el método preferido para tomar las medidas y las imágenes del producto seleccionado. Sigue las instrucciones y completa las medidas solicitadas.

TF

Proceso manual p. 2

o

Proceso de escaneo p. 3

TT


Proceso manual p. 4

o

Proceso de escaneo p. 5


TF - Proceso manual

4 fotos pierna sana

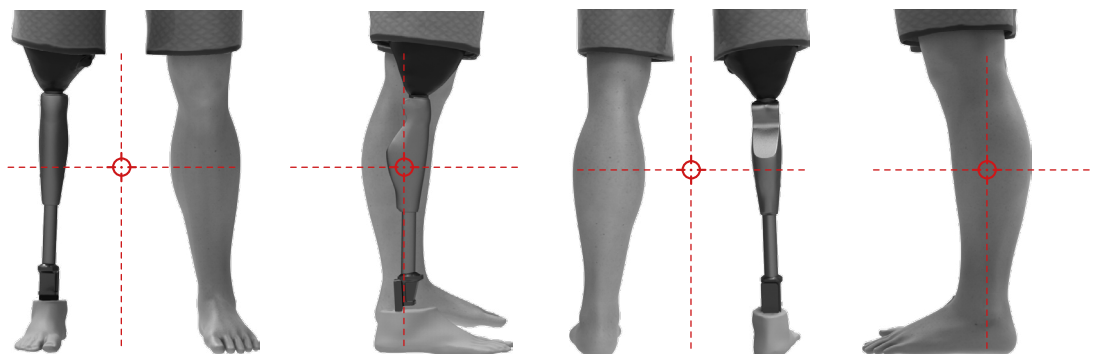


Toma 4 fotos del usuario con la prótesis puesta, como se muestra en las imágenes. La cámara debe estar posicionada perpendicularmente a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben aparecer centradas en la foto. Por favor, recuerda que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluyendo el encaje. Por favor, toma las fotos sin calcetines, zapatos o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

4 fotos prótesis

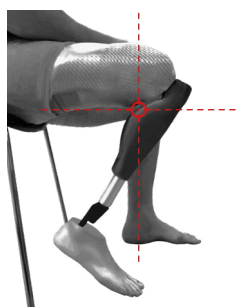


MÁXIMA FLEXIÓN

Toma una foto de la rodilla protésica desde el exterior, en su máxima flexión

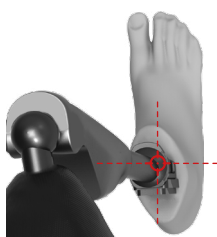

LATERAL SUPERIOR

Posiciona la cámara en el lateral exterior del encaje enfocando hacia abajo.

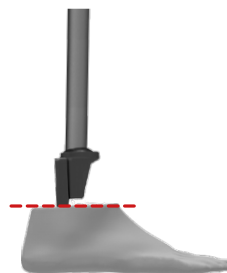


LATERAL Y TRASERA

Posiciona la cámara de forma que la parte superior de la cosmética del pie se vea totalmente recta.



3 medidas

VOLUMEN MÁXIMO

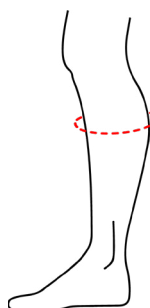

Mide el volumen máximo del gemelo.

cm

VOLUMEN INFERIOR



Mide el volumen a la altura del maleolo.

cm

LONGITUD DEL TUBO



Mide desde el borde inferior de la rodilla protésica al borde superior de la cosmética del pie en su parte más baja.


cm

ENVIAR EL PEDIDO

Envíanos este formulario con los detalles del pedido, las medidas, y las fotos tomadas a orders@unyq.com. Si necesitas asistencia, por favor contacta con nosotros en orders@unyq.com o al +34 854 85 60 92

TF - Proceso de escaneo


4 fotos pierna sana

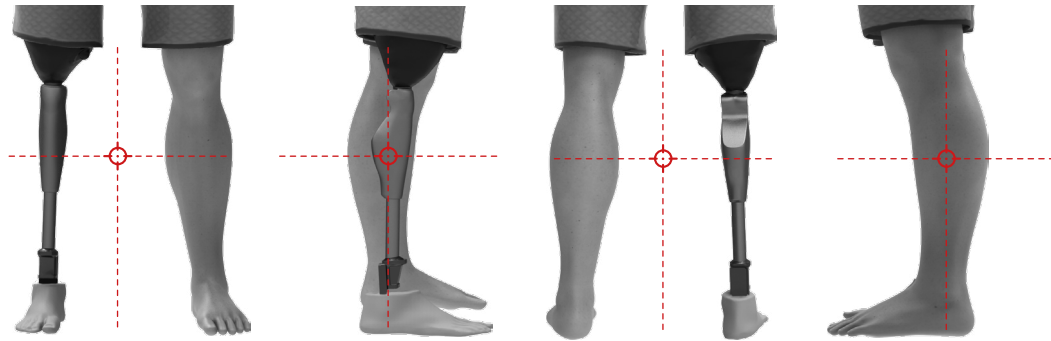

Toma 4 fotos del usuario con la prótesis puesta, como se muestra en las imágenes. La cámara debe estar posicionada perpendicularmente a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben aparecer centradas en la foto. Por favor, recuerda que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluyendo el encaje. Por favor, toma las fotos sin calcetines, zapatos o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

3 medidas


VOLUMEN MÁXIMO

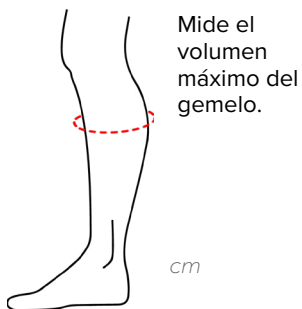

VOLUMEN INFERIOR



LONGITUD DEL TUBO

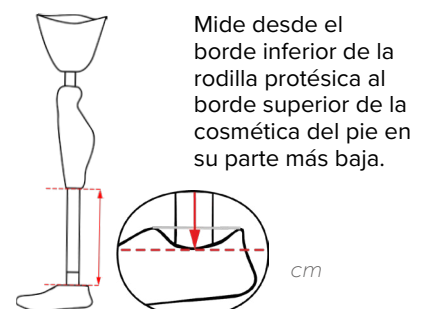

Escaneo



SIN ZAPATOS



SIN CALCETINES

.stl
.obj
FORMATOS



- Todos los componentes protésicos deben ser claramente visibles en el escaneo, incluyendo la parte inferior del encaje. Por favor retira cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis (calcetines, zapatos, etc.)
- Evita los reflejos. Evita interferencias con material reflectante o áreas demasiado oscuras. Si tu escáner no recibe información de estas áreas, cubre las partes reflectantes con una cinta mate (ej: cinta de carroceros) pegada correctamente a la superficie para no crear volumen extra.
- Recomendamos que el entorno tenga un contraste de color con la prótesis.
- Configura el escáner a la mayor resolución posible.
- Escanea la prótesis completa y la pierna sana, con el paciente de pie. Puedes escanear ambas piernas en el mismo archivo o en archivos separados.

Escáners recomendados: Einstar Scanner; Shining 3D Einscan Pro Series Hand Scanners; Artec Structured Light Hand Scanners; Creaform Hand Scanners; Peel3d 3D Scanner.

Escáners no recomendados: 3D Systems / Cubify Sense; Structure Sensor / Core; Microsoft Kinect 3D Scanner; Intel Infrared Sensor Scanners


ENVIAR EL PEDIDO

Envíanos este formulario con los detalles del pedido, las medidas, y las fotos y archivos a orders@unyq.com.

Si necesitas asistencia, por favor contacta con nosotros en orders@unyq.com o al +34 854 85 60 92


TT - Proceso manual

4 fotos pierna sana

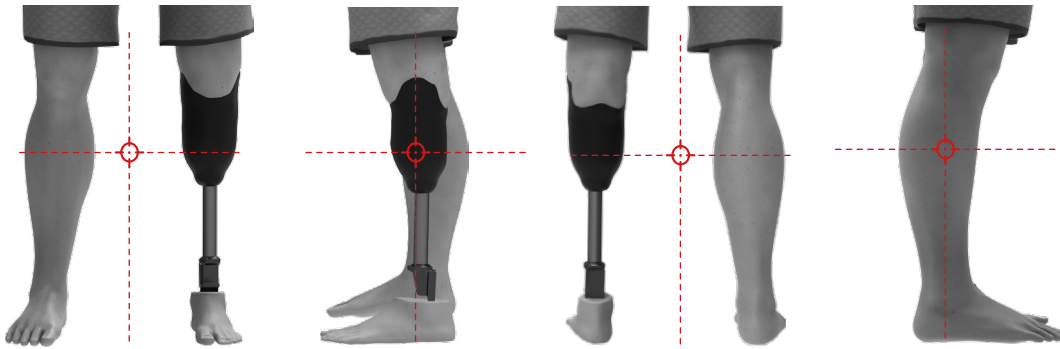

Toma 4 fotos del usuario con la prótesis puesta, como se muestra en las imágenes. La cámara debe estar posicionada perpendicularmente a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben aparecer centradas en la foto. Por favor, recuerda que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluyendo el encaje. Por favor, toma las fotos sin calcetines, zapatos o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

2 medidas

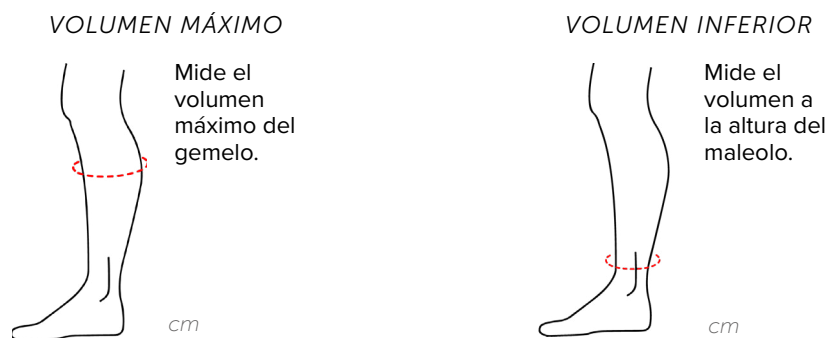


60 fotos de la prótesis

Sigue las instrucciones incluidas en el Kit UNYQ BK para configurar la prótesis para el proceso.



1. Elige una habitación con buena iluminación, y estable. Evita ventanas abiertas que creen contraste.
2. Asegúrate de que no hay espejos u objetos reflectantes.
3. Busca un entorno lo más despejado posible de objetos detrás de la prótesis.
4. No debe haber otras personas en la habitación, para evitar interferencias.

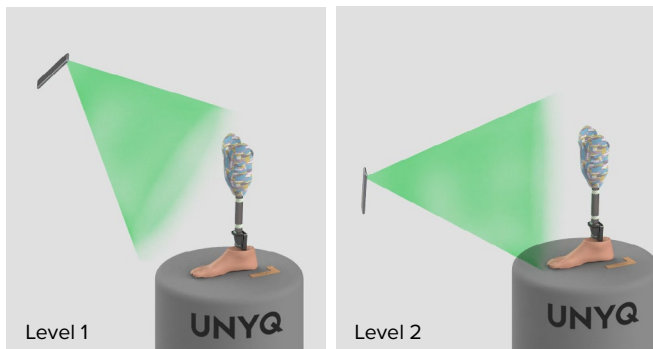

Ahora debes tomar una serie de fotos usando tu cámara o teléfono, mientras caminas alrededor de la prótesis. Debes realizar 2 vueltas, colocando la cámara en 2 niveles diferentes, y tomar 30 fotos por nivel, para un total de 60 fotos.

La primera serie debe ser tomada desde un ángulo más alto que la prótesis (ver esquema nivel 1), y debes caminar alrededor de la prótesis a una velocidad lenta y estable mientras tomas las 30 fotos.


Ahora debes tomar la segunda serie de fotos. En este nivel, posiciona la cámara más perpendicular a la prótesis. Debes tomar otras 30 fotos en este nivel, mientras caminas alrededor de la prótesis.

ENVIAR EL PEDIDO

Envíanos este formulario con los detalles del pedido, las medidas, y las fotos tomadas a orders@unyk.com. Si necesitas asistencia, por favor contacta con nosotros en orders@unyk.com o al +34 854 85 60 92

TT - Proceso de escaneo


4 fotos pierna sana

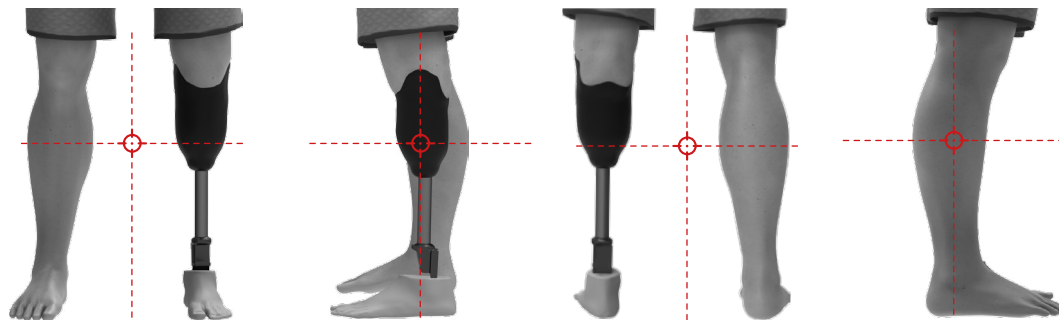

Toma 4 fotos del usuario con la prótesis puesta, como se muestra en las imágenes. La cámara debe estar posicionada perpendicularmente a las piernas, en una posición baja, y ambas piernas deben aparecer centradas en la foto. Por favor, recuerda que todos los componentes protésicos deben ser completamente visibles, incluyendo el encaje. Por favor, toma las fotos sin calcetines, zapatos o cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis.

4 medidas

VOLUMEN MÁXIMO

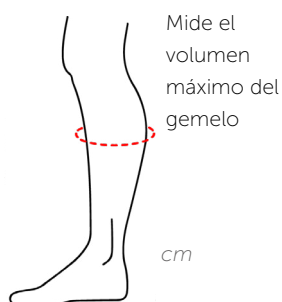


VOLUMEN INFERIOR



LONGITUD DEL TUBO



VOLUMEN ENCAJE

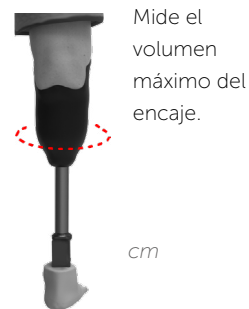

Escaneo



SIN ZAPATOS



SIN CALCETINES

.stl
.obj

FORMATOS



ESCÁNER DE LUZ
ESTRUCTURADA

- Todos los componentes protésicos deben ser claramente visibles en el escaneo, incluyendo la parte inferior del encaje. Por favor retira cualquier objeto que pueda cubrir la prótesis (calcetines, zapatos, etc.)
- Si el paciente lleva una rodillera protésica, mantenla puesta en la prótesis y mete la tela sobrante dentro del encaje.
- Evita los reflejos. Evita interferencias con material reflectante o áreas demasiado oscuras. Si tu escáner no recibe información de estas áreas, cubre las partes reflectantes con una cinta mate (ej: cinta de carroceros) pegada correctamente a la superficie para no crear volumen extra.
- Recomendamos que el entorno tenga un contraste de color con la prótesis.
- Configura el escáner a la mayor resolución posible.
- Escanea la prótesis completa y la pierna sana, con el paciente de pie. Puedes escanear ambas piernas en el mismo archivo o en archivos separados.

Escáners recomendados: Einstar Scanner; Shining 3D Einscan Pro Series Hand Scanners; Artec Structured Light Hand Scanners; Creaform Hand Scanners; Peel3d 3D Scanner.

Escáners no recomendados: 3D Systems / Cubify Sense; Structure Sensor / Core; Microsoft Kinect 3D Scanner; Intel Infrared Sensor Scanners

ENVIAR EL PEDIDO

Envíanos este formulario con los detalles del pedido, las medidas, y las fotos y archivos a orders@unyq.com. Si necesitas asistencia, por favor contacta con nosotros en orders@unyq.com o al +34 854 85 60 92